


Преміальний прилад для догляду вдома

HiSONIC.M

ІНСТРУКЦІЯ

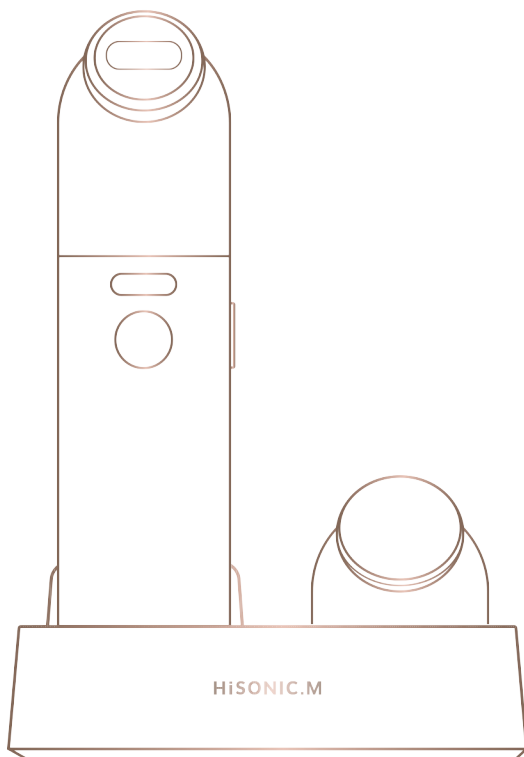

HiSONIC.M

Висококласний прилад для домашнього
догляду, що має характеристики естетичного
обладнання

Інформація англійською мовою →

1) Перед використанням	25
Заходи безпеки / Догляд за виробом	
2) HISONIC.M Вступ	26
Опис продукту, технічні характеристики	
Компоненти продукту, назва / спосіб заміни картриджа	
Спосіб заряджання	
3) Спосіб використання SONO	30
Основні функції продукту / Спосіб використання продукту	
Розташування лімфовузлів / Заборонені зони використання, Режим	
Метод догляду за лімфою / Метод всмоктування ампул	
4) Спосіб використання HIFU	36
Основні функції продукту / Спосіб використання продукту	
Цільові зони / Заборонені зони використання, Режим	
Метод ліфтинг-догляду / Поради з використання	
5) Гарантія	42
Правила гарантії / Гарантія на продукт	
6) Інформація про виробника	44

✳ Для вашої безпеки, будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту та збережіть її для подальшого користування.

✳ УВАГА

1. Цей виріб не є медичним обладнанням.
2. Перед використанням зніміть прозору захисну плівку з головки.
3. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
4. Не призначено для осіб з фізичними, сенсорними чи розумовими обмеженнями (включно з дітьми), або без належного досвіду, якщо вони не під наглядом чи без інструкцій відповідальної особи.
5. Уникайте використання на дітях, вагітних та жінках, що годують груддю.
6. Перед використанням зніміть металеві аксесуари, такі як намиста, сережки тощо.
7. Уникайте використання на ділянках зі шкірними захворюваннями (рани, інфекції, фурункули).
8. Рекомендується проконсультуватися з лікарем при використанні з стоматологічними процедурами, такими як імплантація, лікування нервів, ортодонтія.
9. Рекомендується проконсультуватися з лікарем до проведення будь-яких косметичних процедур.
10. Уникайте використання на людях, які потребують запобіжних заходів щодо здоров'я, таких як наявність кардіостимулятора, імплантатів, історія важких захворювань, амбулаторне лікування.
11. Прилад призначен для догляду лише за шкірою обличчя. Не використовуйте на інших ділянках.
12. Уникайте використання на зіницях (очах), навколо очей і в ділянці щитовидної залози.
13. Під час процедури обов'язково нанесіть достатню кількість гелю і використовуйте прилад в тісному контакті зі шкірою, щоб між шкірою і приладом не було проміжків.
14. Уникайте тривалого використання на одній ділянці, щоб не викликати подразнення шкіри.
15. Встановіть відповідну потужність відповідно до чутливості шкіри.
16. Ми не несемо відповідальності за будь-які побічні ефекти, які можуть виникнути в результаті недотримання наших рекомендацій.

✳ Догляд за продуктом

1. Якщо пристрій має знімний блок живлення, використовуйте тільки той, що йде в комплекті.
2. Не модифікуйте та не розбирайте-ремонтуйте виріб. Якщо користувач модифікує-розбирає-ремонтує виріб, безкоштовне сервісне обслуговування не може бути надано протягом гарантійного терміну, тому обов'язково звертайтеся до призначеного сервісного центру.
3. Не мийте і не занурюйте виріб у воду — це може спричинити ураження струмом чи несправність.
4. Після використання дезінфікуйте головку SONO спиртом. Для дезінфекції використовуйте м'яку тканину, щоб уникнути подряпин — грубі серветки чи тертя можуть пошкодити поверхню.
5. Після використання дезінфікуйте насадку HIFU спиртом і м'якою тканиною. (Для чорної плівки спирт заборонено.) Чорну плівку спиртом не обробляти — можливе пошкодження.
6. Для очищення основного корпусу використовуйте вологі серветки або м'яку тканину, оскільки використання спирту може призвести до знебарвлення та забруднення.
7. Для догляду та сервісу дотримуйтесь правил гарантії виробника.

Опис продукту

HiSONIC.M — це висококласний пристрій для домашнього догляду, що має характеристики естетичного обладнання. За допомогою лише одного пристрою можна використовувати багаточастотний ультразвук високої щільності (SONO) для догляду за лімфою епідермісу та високоінтенсивний фокусований ультразвук (2way HIFU) для підтяжки контурів обличчя.



2-сторонній високоінтенсивний фокусований ультразвук (HIFU), який підвищує еластичність шарів дерми-SMAS за допомогою 2 імпульсів енергії на 2 глибинах, 3.0/4.5 мм.




Високочастотний мультиульตราзвук, який щільно заповнює шкіру зсередини за допомогою випромінювання двох ультразвукових частот 3/10 МГц.

Технічні характеристики продукту


Технічні характеристики цього продукту можуть бути змінені без окремого повідомлення з метою поліпшення продуктивності.

Назва моделі	HIFU	Назва моделі	Косметичний прилад
Назва продукту	Ш49 x B196 x Г32 мм	Вага продукту	Приблизно 272 г
Вага SONO	Приблизно 78 г	Вага HIFU	Приблизно 64 г
Живлення	Постійний струм 5В 2А	Акумулятор	2400 мА·год
Кабель зарядки	C-TYPE	LCD	1.14 дюйма (135 x 240 пікселів)
Час заряджання	Приблизно 180 хвилин	Час використання	Приблизно 150 хвилин
Виробник/продавець	JLU Co., Ltd.	Дата виготовлення	Окреме позначення
Сервісний центр	+82 10-4505-7989	Служба підтримки	+82 51-331-7185


Компоненти продукту

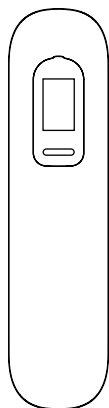


Основна
частина

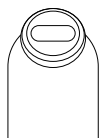


Картридж
HIFU

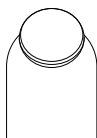


Картридж
SONO

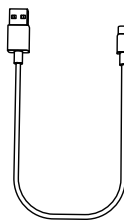

Зарядний кабель
C-TYPE

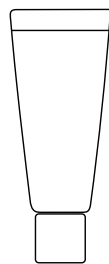


OVACO TIMESLIP
WATER MAX
CREAM 90 г
(безкоштовно)

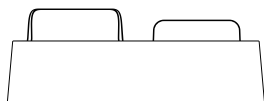

Підставка

Назва продукту

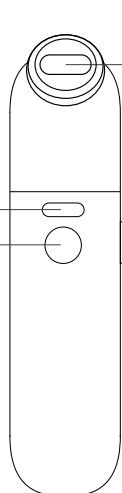


[Передня частина]

Кнопка заміни
Кнопка живлення
(УВІМК./ВИМК.)

Головка (зона контакту)

Кнопка Старт/Стоп

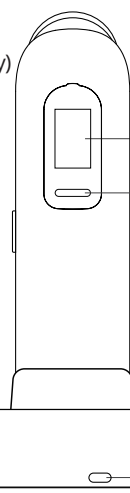

[Задня частина]


LCD-екран

Кнопка режиму
(частота)


Порт зарядки
(C-TYPE)

Метод заміни картриджа

■ Як приєднати

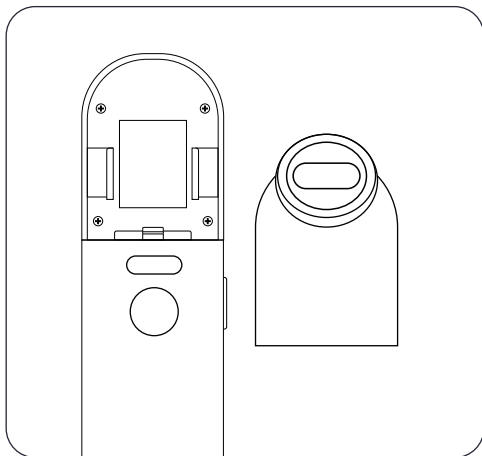


1. Підготуйте пристрій і картридж.

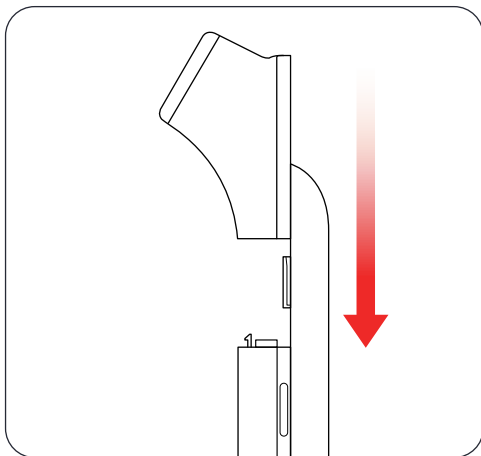


2. Вставте картридж, щоб повністю підключити його до пристрою, як показано на зображенні.

■ Як від'єднати

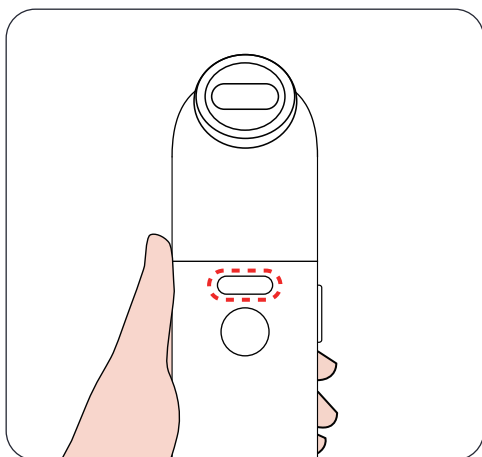

3. Натисніть і утримуйте кнопку заміни картриджа.

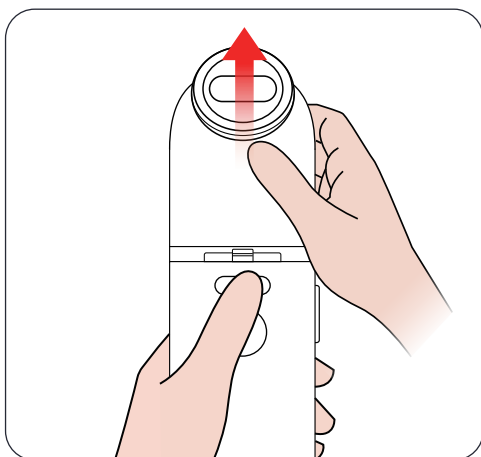


4. Утримуючи кнопку, потягніть картридж, щоб від'єднати його, як показано на зображенні.

Спосіб заряджання


Підключаючи зарядний кабель до підставки, повністю вставте роз'єм.

Інакше заряджання може відбуватися з перебоями.


Якщо пристрій не вмикається, перевірте підключення до зарядного порту підставки.

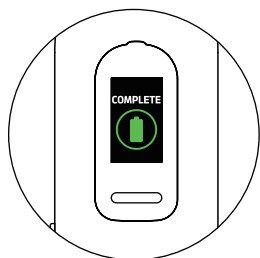

Екран
Зарядження завершено

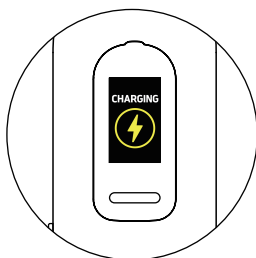

Екран заряджання
Під час заряджання значок
буде блимати.

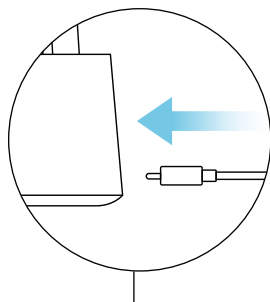

Підключення
зарядного
кабелю C-TYPE




[Задня частина підставки]

Основні функції продукту

■ Багаточастотний ультразвук високої щільності з 2 глибинами (3/10 МГц)

Завдяки перехресному випромінюванню ультразвуку на 2 частотах (довжинах хвиль) 3/10 МГц, енергія проникає від епідермісу до шару SMAS, сприяючи поліпшенню стану шкіри.

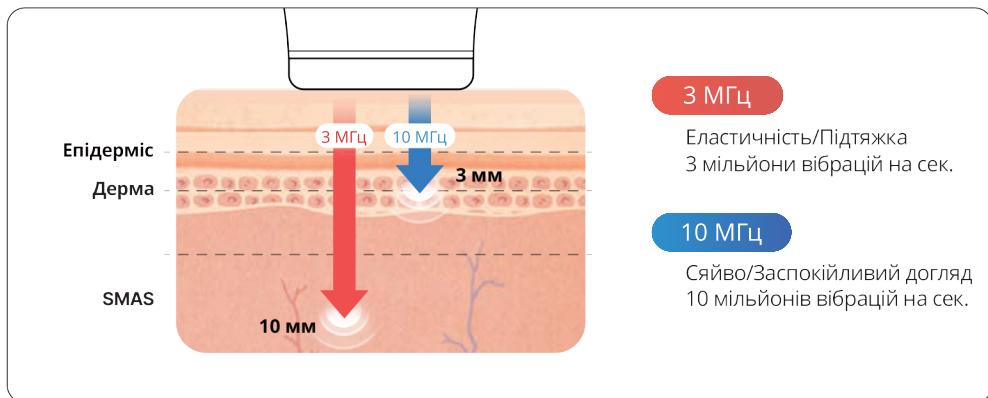

■ Гіроскопічний датчик, що виявляє рухи

Пристрій виявляє рух, щоб уникнути несправностей та перегріву.

Якщо рух не виявлено, подача енергії автоматично припиняється.

Коли гіроскоп активується і рух знову виявляється, подача енергії відновлюється автоматично.



Спосіб використання продукту

Увімкнути

Натисніть кнопку живлення і утримуйте її більше 3 секунд, і пристрій увімкнеться з екраном.

Вимкнути

Коли пристрій увімкнеться, натисніть кнопку живлення і утримуйте її більше 3 секунд, щоб вимкнути його.


Налаштування режиму

Встановіть частоту, коротко натиснувши кнопку режиму. (3.0 МГц/10 МГц/3.0 МГц і 10 МГц)

Налаштування потужності


Встановіть потужність, коротко натиснувши кнопку живлення. (Рівень 1~5)

Інформація на екранах

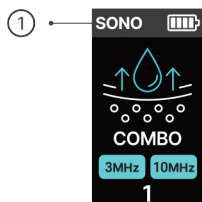


① SONO

Відображається поточний картридж.

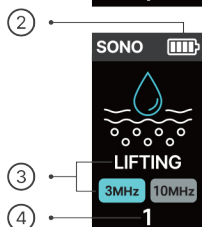


② Акумулятор

Відображається стан батареї.

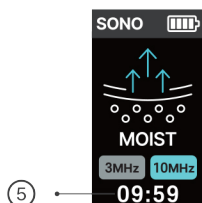

③ Режим і частота

Відображаються поточний режим і частота.

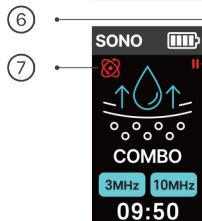

④ Рівень потужності

Відображається поточна встановлена потужність.

⑤ Тип лікування

Пристрій за замовчуванням налаштований на 10 хвилин, під час роботи відображається залишок часу.

⑥ Пауза

Під час використання пауза через кнопку старт/стоп.

⑦ Гіроскопічний датчик

Якщо під час роботи пристрій не рухається понад 10 секунд, він автоматично переходить у режим паузи і припиняє подачу енергії.

***Довідка щодо розташування
лімфатичних вузлів**



Лімфатичний вузол
(привушний)

3

2

Лімфатичний вузол
(глибинний)

Лімфатичний вузол
(термінальний)

1

Важливість догляду за лімфою

Лімфатична система є важливою частиною нашого тіла, граючи ключову роль у кровообігу, обміні рідин та роботі імунної системи. Коли лімфообіг блокується, це може спричинити набряки, втому, ослаблення імунітету, погіршення стану шкіри та збільшення ваги. Тому перед початком будь-якого догляду за шкірою важливо спершу відновити вільний рух лімфи.


*Прочитайте перед використанням.

Уважно прочитайте застереження в цьому посібнику перед використанням.



Заборонені області використання

Зіниці (очі),
навколо очей

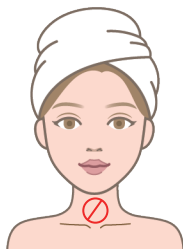

Заборонені області використання

Область, де проходить
щитоподібна залоза



Цикл використання

Можна використовувати
щодня, рекомендується
10 хвилин на день

Режим (Виберіть частоту)

Його можна використовувати в 3 режимах.



ЛІФТІНГ [3 МГц]

3 мільйони коливань на секунду / проникнення на 10 мм / еластичність · ліфтинг · антивіковий догляд · проблемна шкіра · зменшення набряків



ЗВОЛОЖЕННЯ [10 МГц]

10 мільйонів коливань на секунду / проникнення на 3 мм / сяйво · заспокоєння · зволоження · пори · почервоніння · освітлення шкіри




КОМБО [3/10 МГц]

Оптимальне поєднання для лімфообігу та регенерації шкіри — це перехресний вихід двох типів ультразвуку (Рекомендовано до використання).

Метод догляду за лімфою

■ Рекомендоване використання (для всього обличчя)


КОМБО (3/10 МГц)	Рівень 3~5	10~15 хвилин	Можна щодня
------------------	------------	--------------	-------------

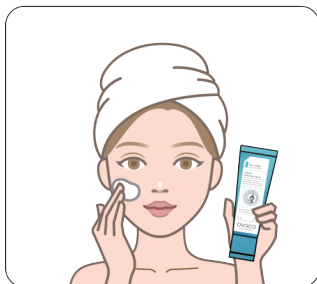

ШАГ 01

Нанесіть гель

Нанесіть достатню кількість гелю на ділянку, що підлягає лікуванню.

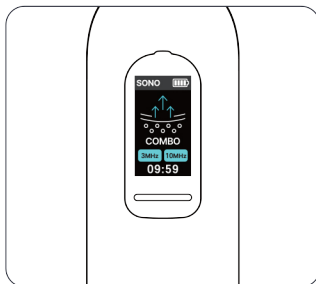


ШАГ 02

Виберіть режим · Потужності

Перед початком використання виберіть режим (частоту) та потужність.


*Див. рекомендоване використання.

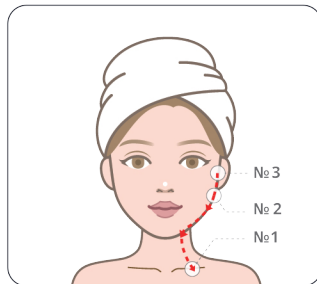

ШАГ 03

Лікування лімфатичних вузлів


Розтирайте кожен лімфовузол і прилеглу ділянку в порядку 1>2>3 по 30 секунд. Потім проводьте насадкою у напрямку 3>2>1.

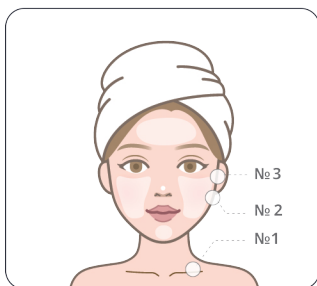

ШАГ 04

Повний догляд за обличчям


Розтирайте все обличчя, починаючи з підборіддя, далі щоки > очі > лоб, протягом приблизно 6 хвилин.

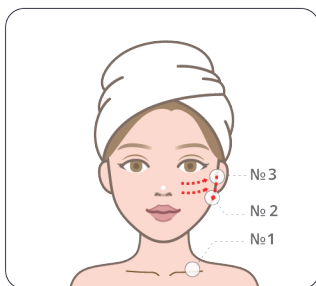

ШАГ 05

Лікування лімфатичних вузлів

Проводьте насадкою від центру обличчя до лімфовузлів 3 і 2 протягом приблизно 1 хвилини.

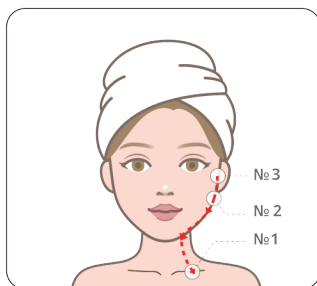


ШАГ 06

Лікування лімфатичних вузлів

Проводьте насадкою у напрямку до лімфовузлів 3>2>1 приблизно 1 хвилину.


Метод всмоктування ампули

■ Рекомендоване використання (для всього обличчя)

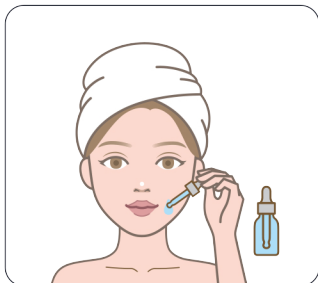КОМБО (3/10 МГц)**Рівень 3~5****Близько 5 хвилин****Можна щодня****ШАГ 01**

Нанесіть ампулу

Нанесіть на шкіру рідкий препарат з ампули.

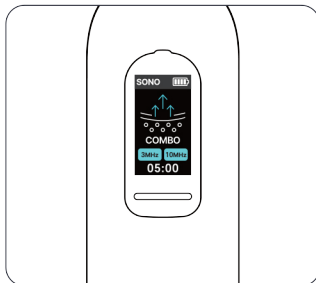**ШАГ 02**

Виберіть режим · Потужності

Перед початком використання пристрою виберіть режим (частоту) та потужність.

*Refer to the recommended usage.

**ШАГ 03**

Почніть лікування

Нанесіть на все обличчя і дайте ампулі вбратися стільки, скільки потрібно.

Рекомендація щодо використання!



Догляд за секцією

Розділіть обличчя навпіл, щоб гель або ампула не висохли під час процедури.



Використовуйте спеціальний гель

Для синергетичного ефекту з проникненням ультразвуку (догляд за лімфою) спробуйте використовувати його разом з кремом Ovaco Timeslip Water Max Cream.




Використання ампули, сироватки, маски

Будь ласка, використовуйте рідку формулу, а не крем. Будь ласка, використовуйте маску-серветку, а не маску-желе.

Основні функції продукту


■ 2-сторонній високоінтенсивний фокусований ультразвук (3,0/4,5 мм)

2-сторонній HIFU з глибиною 3.0/4.5 мм забезпечує високоінтенсивну сфокусовану ультразвукову енергію, яка досягає дерми та SMAS-шарів, сприяючи поліпшенню стану шкіри.

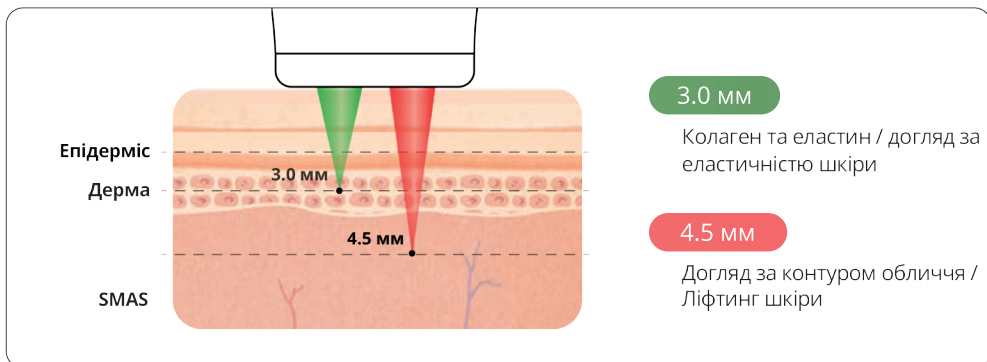

■ Гіроскопічний датчик, що виявляє рухи

Пристрій виявляє рух, щоб запобігти несправностям і перегріву. Якщо рух не виявлено, випромінювання автоматично зупиняється. Коли гіроскоп активується і рух знову виявляється, випромінювання відновлюється автоматично.

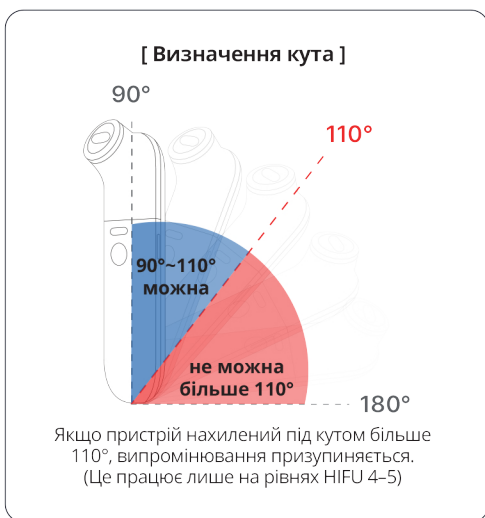

Спосіб використання продукту

Увімкнути

Натисніть кнопку живлення і утримуйте її більше 3 секунд, і пристрій увімкнеться з екраном.

Вимкнути

Коли пристрій увімкнеться, натисніть кнопку живлення і утримуйте її більше 3 секунд, щоб вимкнути його.


Налаштування режиму

Встановіть частоту, коротко натиснувши кнопку режиму. (3,0 мм/4,5 мм/3,0 і 4,5 мм)

Налаштування потужності


Встановіть потужність, коротко натиснувши кнопку живлення. (Рівень 1~5)

Інформація на екранах

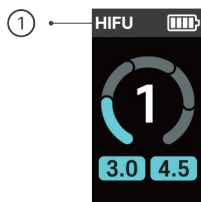

① HIFU

Відображається поточний під'єднаний картридж.

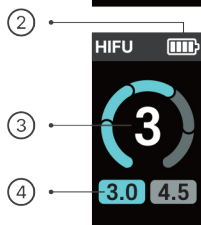

② Акумулятор


Відображається стан акумулятора.



③ Рівень потужності


Відображається поточна встановлена потужність.

Рівні 1~3: 3 Гц (3 імпульсів в секунду) / Рівні 4~5: 5 Гц (5 імпульсів в секунду)

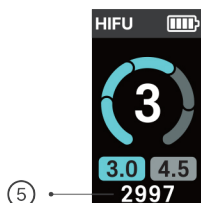


④ Режим

Відображається поточний режим.

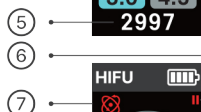

⑤ Імпульси

За замовчуванням встановлено 3000 імпульсів, а під час роботи відображається кількість лишившихся імпульсів.

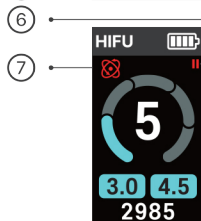

⑥ Пауза

Під час використання можна зробити паузу за допомогою кнопки стар/стоп.

⑦ Гіроскопічний датчик

Якщо під час роботи протягом більше 3 секунд не буде виявлено жодного руху або якщо пристрій нахилиться назад більше ніж на 110° (рівень 4~5), пристрій перейде в режим паузи, під час якого автоматично припиниться подача енергії.

***Імпульси конкретної ділянки (половина обличчя, 1500 імпульсів)**



Картридж HIFU гарантує 300 000 імпульсів

- Рекомендоване використання: 144 000 імпульсів на рік / 288 000 імпульсів за 2 роки
- Гарантовано 300 000 імпульсів протягом 2 років від дати виробництва для продуктів, що пройшли реєстрацію (Безкоштовне сервісне обслуговування не надається у випадках пошкодження елементів, поломки виробу, подрипин, витоку охолоджуючої рідини або зміни кольору.)


*Прочитайте перед використанням.

Уважно прочитайте застереження в цьому посібнику перед використанням.



Заборонені області використання

Зіниці (очі),
навколо очей

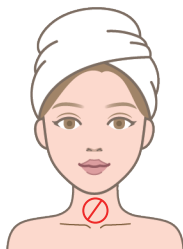

Заборонені області використання

Область, де проходить
щитоподібна залоза



Цикл використання

7–10 днів
Рекомендується
використовувати 3000
імпульсів для всього обличчя

Режим (Виберіть глибину)

Його можна використовувати в 3 режимах.



Режим 3.0

3.0 мм вглиб шкіри / все обличчя / вироблення
колагену та еластину, догляд за еластичністю шкіри



Режим 4.5

4,5 мм проникнення в шкіру / подвійне підборіддя, лінія щелепи,
жирові відкладення щік / догляд за контуром обличчя, ліфтинг шкіри



Режим 3.0/4.5

Оптимальне поєднання для контуру обличчя — перехресне випромінювання
фокусованого ультразвуку на двох різних глибинах (рекомендовано).

Метод ліфтинг-догляду


■ Рекомендоване використання (для всього обличчя)

3.0/4.5 Режим

Рівень 3~5

3000 імпульсів


Цикл 7~10 днів

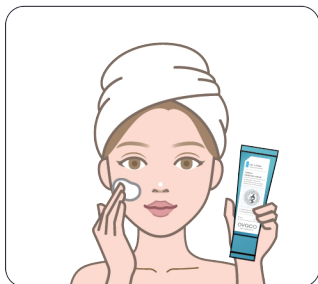

ШАГ 01

Нанесіть гель

Нанесіть достатню кількість гелю на ділянку, що підлягає лікуванню.

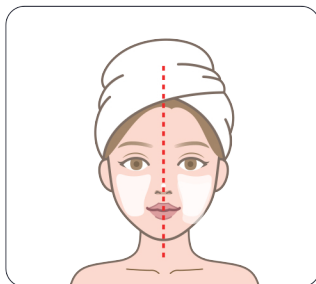

ШАГ 02

Догляд за секцією

Щоб гель не висух, спробуйте розділити обличчя навпіл для обробки.




ШАГ 03

Виберіть режим-Потужності

Перед початком використання пристрою виберіть режим (глибину) та потужність.


*Див. рекомендоване використання.

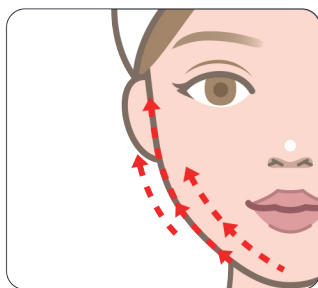

ШАГ 04

Ліфтинг-догляд


Немає фіксованого порядку для обробки ділянок. Для ефективного підтягування контурів обличчя, тримайте прилад так, ніби ви підтягуєте шкіру.

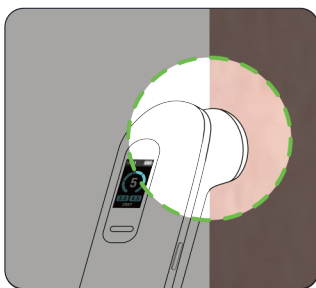

Правильне використання

Контакт головки: Так

Головка повинна повністю прилягати до шкіри, не залишаючи проміжків.

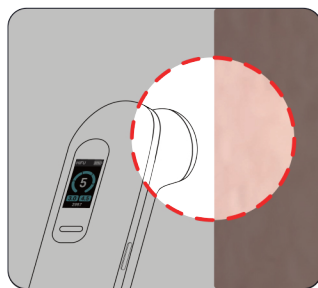


Неправильне використання

Контакт головки: Ні

Якщо між головою і шкірою є простір, ви можете відчувати дискомфорт, а енергія може не проникати ефективно.

Поради щодо використання

■ Розтирання


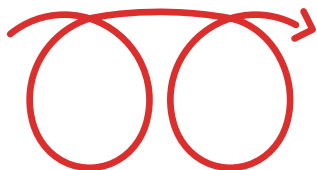


Цей метод передбачає кругові рухи. Почніть з центру обличчя і рухайтесь назовні, піднімаючи від низу до верху. Це підходящий метод для початківців, які не знайомі з використанням HIFU.

■ Лінійне проведення



Цей метод передбачає рух по прямій лінії. Почніть з центру обличчя і рухайтесь назовні, піднімаючи від низу до верху. Цей метод підходить для користувачів, які знайомі з використанням HIFU для догляду за шкірою в домашніх умовах.

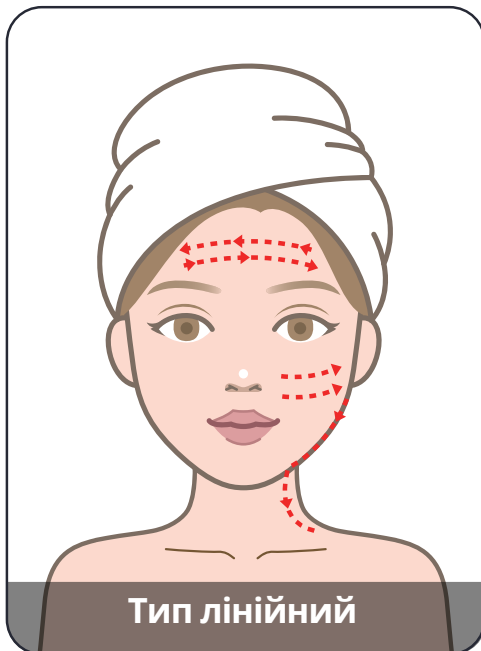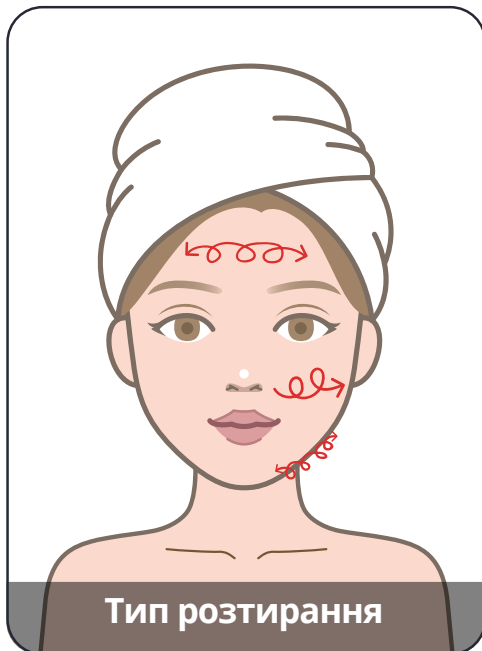

Правила гарантії

* Примітка

Гарантійний термін на продукт становить 1 рік з дати виготовлення.

Ці гарантійні умови діють лише в межах гарантійного терміну та за умовами, встановленими нашою компанією. Для отримання післягарантійного обслуговування звертайтеся до місця покупки або до сервісного центру.

* Протягом гарантійного терміну

Безкоштовне обслуговування 1 рік від дати виробництва (потрібна реєстрація).

Протягом гарантійного терміну, якщо виникає проблема, пов'язана з виробничим процесом обладнання, можна отримати безкоштовне сервісне обслуговування.

* Після закінчення гарантійного терміну

Платне післягарантійне обслуговування надається для товарів, що не зняті з виробництва, а для знятих з виробництва воно може бути недоступним.

* Винятки

У цих випадках сервісний центр оплачується навіть під час гарантії.

- 1) Загублено або викрадено
- 2) Пошкодження через недбалість користувача
- 3) Самовільна модифікація, розбирання або ремонт сторонніми особами
- 4) Неправильні умови зберігання
- 5) Пошкодження через стихійні лиха (пожежа, пошкодження сіллю, повінь тощо)

Гарантія на продукт

Гарантія на продукт

Назва продукту: HiSONIC.M

Дякуємо за придбання продукції JLU.

Цей продукт є оригінальним товаром, виготовленим головним офісом компанії та відправленим після проходження суворого контролю якості та перевірки.

Безкоштовне обслуговування протягом гарантійного терміну доступне після реєстрації продукту на офіційному сайті.

(С/Н: серійний номер зазначено окремо на виробі)



Будь ласка, перейдіть за QR-кодом і зареєструйте продукт.

Сервісний центр: +82 10-4505-7989

JLU Co., Ltd.

Офіс 410~412, Центр індустрії знань Пусана, 111, Хьойоль-ро, район Пук-гу, Пусан, Республіка Корея

 +82 51-331-7185

 jlu_korea_official

 +82 10-3752-8240 (англ. лінія)

 JLU Co.,Ltd

 +82 10-4505-7989

 jlu_korea_official

 jlukorea@naver.com

 blog.naver.com/jlukorea

Заява про відповідність вимогам FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Його робота підпорядковується двом умовам:

(1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з такими, що можуть спричинити небажану роботу.

Заява про перешкоди FCC

Це обладнання протестоване і визнане таким, що відповідає межам для цифрового пристрою класу В відповідно до частини 15 правил FCC. Воно призначене для захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо не встановлене та не використовується відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди у радіозв'язку. Але немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди в прийомі радіо- або телесигналів, що можна визначити шляхом вимкнення та увімкнення пристрою, користувачу рекомендується усунути перешкоди одним із наступних способів:

- Перенаправте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, яка належить іншій електричній мережі, ніж приймач.
- Зверніться до продавця або кваліфікованого радіо/ТВ техніка за допомогою.

Застереження FCC

Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію цього обладнання. Цей передавач не повинен розміщуватися або працювати разом з будь-якою іншою антеною або передавачем.